

Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor

Quick Guide

Model: BP2/BP2A


Contact us: info@med100.de

Website: www.med100.de

English

Thank you for purchasing the BP2/BP2A blood pressure monitor. For more details about the product, please refer the user manual.

1. Overview

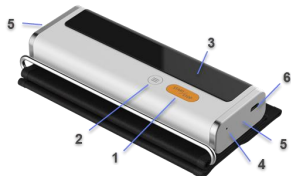


1. Start/Stop button
2. Function button
3. Display screen
4. LED indicator
5. ECG electrode
6. Charging cable connector

2. Blood Pressure Measurement

2.1. Applying the Arm Cuff


Remove tight-fitting clothing from your left upper arm. Do not place the arm cuff over thick clothes. Wrap the cuff around the upper arm, about 1 to 2 cm above the inside of the elbow, as shown.

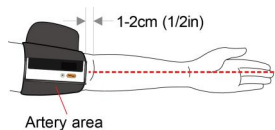

Note: Keep the monitor wearing position aligned with the middle finger.

2.2. How to Sit Correctly

Place your arm on a table so the cuff is level with your heart.

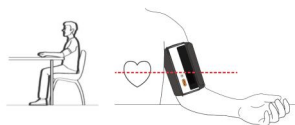

2.3 Measuring Blood Pressure

1. Power on the blood pressure monitor.
2. Press **Start/Stop** button to start blood pressure measurement.
3. The monitor will automatically deflate the cuff slowly during measurement.
4. The readings will be displayed when the measurement finished.

Note: During measurement, you should keep still

and do not squeeze the cuff.




Blood pressure result screen

3. Recording ECG


There are four methods for recording ECG by cablefree operation.

Note: The recording ECG feature is only available for the BP2 model.

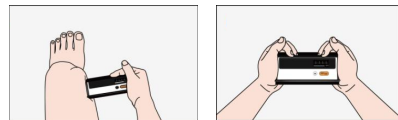

A. Right hand to left leg

B. Hand to hand

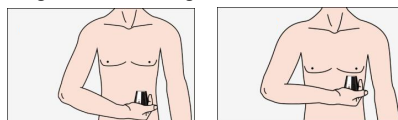

C. Right hand to abdomen D. Right hand to chest

To start an ECG Recording:

1. Put your right palm on the right side electrodes of the Monitor.
2. Put the left side electrodes to the body position that you desired to measure.
3. Once the body parts are placed on the electrodes, press Function button to start the EKG recording.
4. The readings will come after 30 seconds.



Recording ECG screen

Note: You can get different signal amplitude from the different methods. Use method A or method C if signal is too low in method B.

4. Download the App

App name: ViHealth

iOS: App Store

Android: Google Play


Caution: DO NOT pair the device in your smart device's settings.



Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für das Blutdruckmessgerät BP2/BP2A entschieden haben. Weitere Einzelheiten zum Produkt finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

1. Übersicht

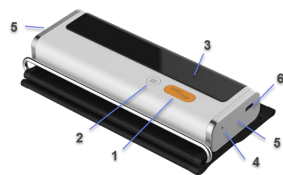


1. Start/Stop-Taste
2. Die Funktionstaste
3. der Bildschirm
4. die LED-Anzeige
5. EKG-Elektrode
6. Kabelstecker aufladen

2. Blutdruckmessung

2.1. Anlegen der Armmanschette


Beschreiben Sie eng anliegende Kleidung vom linken Oberarm. Legen Sie die Armmanschette nicht über dicke Kleidung. Legen Sie die Manschette um den Oberarm, etwa 1 bis 2 cm oberhalb der Innenseite des Ellenbogens, wie abgebildet.

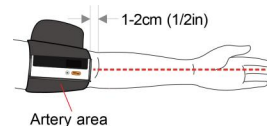

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Trageposition des Monitors auf den persönlichen Finger.

2.2. Richtiges Sitzen

Legen Sie Ihren Arm so auf einen Tisch, dass Sie sich die Manschette auf Höhe Ihres Herzens fühlen.

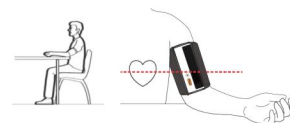

2.3. Blutdruck messen

1. Schalten Sie das Blutdruckmessgerät ein.
2. Drücken Sie die Start/Stop-Taste, um die Blutdruckmessung zu starten.
3. Das Überwachungsgerät entlüftet die Manschette während der Messung automatisch langsam.
4. Die Messwerte werden angezeigt, wenn die Messung beendet ist.

Hinweis: Während der Messung sollten Sie stillhalten und die Manschette nicht zusammendrücken.




Blutdruck-Ergebnisbildschirm


3. Aufzeichnung des EKGs

Es gibt vier Methoden zur kabellosen EKG-Aufzeichnung.

Hinweis: Die Aufnahme-EKG-Funktion ist nur für das BP2-Modell verfügbar.

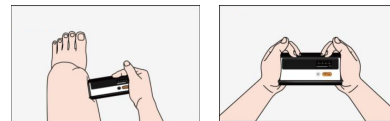

A. Rechte Hand zum linken Bein B. Hand zur Hand

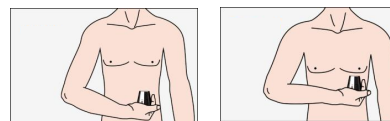

C. Rechte Hand zum Bauch D. Rechte Hand zur Brust

So starten Sie eine EKG-Aufzeichnung:

1. Legen Sie Ihre rechte Handfläche auf die rechtsseitigen Elektroden des Monitors.
2. Legen Sie die linken Seitenelektroden auf die Körperposition, die Sie messen möchten.
3. Sobald die Körperteile auf den Elektroden platziert sind, drücken Sie die Funktionstaste, um

die EKG-Aufzeichnung zu starten.

4. 30 Sekunden nach dem Start der Aufzeichnung werden die Messwerte angezeigt.



Aufnahme des EKG-Bildschirms

Hinweis: Sie können unterschiedliche Signalamplituden durch die verschiedenen Methoden erhalten. Verwenden Sie Methode A oder Methode C, wenn das Signal in Methode B zu niedrig ist.

4. Downloaden Sie die App

App-Name: ViHealth

iOS: App Store

Android: Google Play


Achtung: Koppeln Sie das Gerät NICHT in den Einstellungen Ihres Smart-Geräts.



Italiano

Grazie per aver acquistato il misuratore di pressione BP2/BP2A. Per maggiori dettagli sul prodotto, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

1. Panoramica

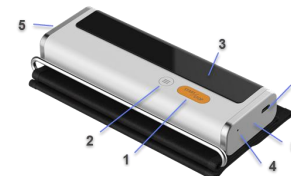


1. Pulsante Start / Stop
2. Pulsante di funzione
3. Schermata di visualizzazione
4. Indicatore 4. LED
5. Elettrodo 5. ECG
6. Connettore del cavo di ricarica

2. Misurazione della pressione sanguigna

2.1. Applicazione del bracciale

Togliere gli indumenti aderenti dal braccio sinistro. Non posizionare il bracciale del braccio su abiti spessi. Avvolgere il bracciale intorno al braccio superiore, circa 1 o 2 cm sopra la parte interna del gomito, come mostrato in figura.

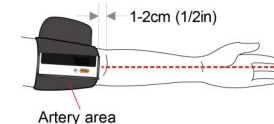

Artery area

Nota: Mantenerne la posizione di indossaggio del monitor allineata con il dito medio.

2.2. Come sedersi correttamente

Mettete il braccio su un tavolo in modo che il bracciale sia all'altezza del vostro cuore.



2.3. Misurazione della pressione sanguigna

1. Accendere il misuratore di pressione sanguigna.

2. Premere il pulsante Start/Stop per avviare la misurazione della pressione sanguigna.
3. Il monitor sgonfierà automaticamente il bracciale lentamente durante la misurazione.
4. Le letture saranno visualizzate quando la misurazione finirà.

Nota: durante la misurazione, si dovrebbe tenere fermo e non stringere il bracciale.




Schermata dei risultati della pressione sanguigna


3. Registrazione dell'ECG

Esistono quattro metodi per la registrazione dell'ECG mediante funzionamento senza cavi.

Nota: la funzione di registrazione ECG è disponibile solo per il modello BP2.

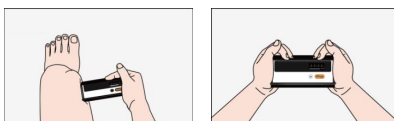

A. Mano destra verso la gamba sinistra B. Mano verso la mano

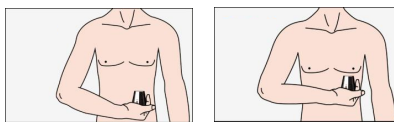

C. Mano destra verso l'addome D. Mano destra verso il torace

Per avviare una registrazione ECG:

1. Mettere il palmo destro degli elettrodi sul lato destro del monitor.
2. Mettere gli elettrodi del lato sinistro nella posizione del corpo che si desiderava misurare.
3. Una volta posizionate le parti del corpo sugli elettrodi, premere il pulsante Funzione per avviare la registrazione dell'ECG.
4. Le letture arriveranno dopo 30 secondi.



Schermata di registrazione dell'ECG

Nota: È possibile ottenere un'ampiezza del segnale diversa dai diversi metodi. Utilizzare il metodo A o il metodo C se il segnale è troppo basso nel metodo B.

4. Scarica l'App

Nome app: ViHealth
iOS: App Store
Android: Google Play




Attenzione: NON accoppiare il dispositivo nelle impostazioni del dispositivo smart.

Español

Gracias por comprar la presión sanguínea BP2/BP2A monitor. Para obtener más detalles sobre el producto, consulte el manual de usuario del dispositivo.

1. Información general

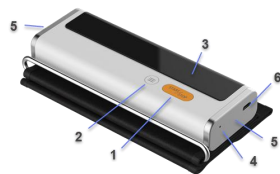


1. Botón de encendido / apagado
2. Botón de función
3. Pantalla de visualización
4. indicador LED
5. Electrodo ECG
6. Conector del cable de carga

2. Medición de la presión arterial

2.1. Colocación del brazalete


Quítese la ropa ajustada de la parte superior del brazo izquierdo. No coloque el brazalete sobre ropa gruesa. Envuelva el brazalete alrededor de la parte superior del brazo, aproximadamente 1 a 2 cm por encima del interior del codo, como se muestra.

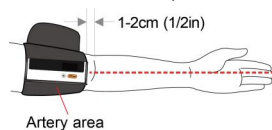

Nota: Mantenga la posición de uso del monitor alineada con el dedo medio.

2.2. Cómo sentarse correctamente

Coloque su brazo sobre una mesa de modo que el brazalete esté al nivel de su corazón.

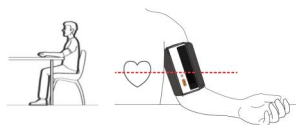

2.3 Medición de la presión arterial

1. Encienda el monitor de presión arterial.
2. Presione el botón Start / Stop para iniciar la medición de la presión arterial.
3. El monitor desinflará automáticamente el brazalete lentamente durante la medición.
4. Las lecturas se mostrarán cuando finalice la medición.


Nota: Durante la medición, debe permanecer quieto y no apretar el brazalete.




Pantalla de resultados de presión arterial

3. Registro de ECG

Hay cuatro métodos para registrar ECG sin cables. Nota: La función de grabación de ECG solo está disponible para el modelo BP2.

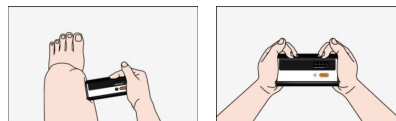

A. Mano derecha a pierna izquierda B. Mano a mano

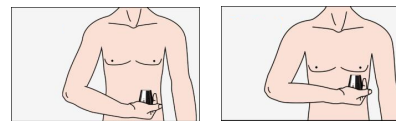

C. Mano derecha al abdomen D. Mano derecha al pecho

Para iniciar una grabación de ECG:

1. Ponga su palma derecha en los electrodos del

lado derecho del

Monitor.

2. Coloque los electrodos del lado izquierdo en la posición del cuerpo que desea medir.
3. Una vez que las partes del cuerpo estén colocadas sobre los electrodos, presione el botón Función para iniciar la grabación de EKG.
4. Las lecturas vendrán después de 30 segundos.



Pantalla de grabación de ECG

Nota: Puede obtener una amplitud de señal diferente con los diferentes métodos. Utilice el método A o el método C si la señal es demasiado baja en el método B.

4. Descarga la aplicación

Nombre de la aplicación: ViHealth
iOS: App Store

Android: Google Play


Advertencia: NO empareje el dispositivo en la configuración del dispositivo inteligente.



Français

Nous vous remercions d'avoir acheté le tensiomètre BP2/BP2A. Pour plus de détails sur le produit, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil.

1. Vue d'ensemble

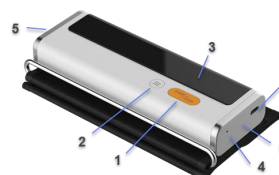


1. Botón de inicio / parada
2. Botón de función
3. Pantalla de visualización
4. Indicador LED
5. Electrodo ECG
6. Conector de cable de carga

2. Medición de la presión arterial


2.1. Mise en place du brassard

Enlevez les vêtements serrés de la partie supérieure gauche de votre bras. Ne placez pas le brassard sur des vêtements épais. Enroulez le brassard autour du bras, à environ 1 à 2 cm au-dessus de l'intérieur du coude, comme indiqué. Nota: Maintenez la position de port du moniteur alignée avec le majeur.

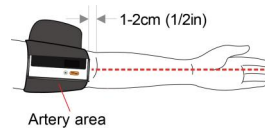

2.2. Comment s'asseoir correctement

Placez votre bras sur une table de manière à ce que le brassard soit au niveau de votre cœur.

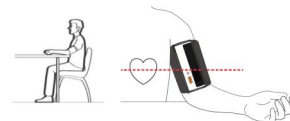

2.3. Mesure de la pression artérielle

1. Allumez le tensiomètre.
2. Appuyez sur le bouton Start/Stop pour démarrer la mesure de la pression artérielle.
3. Le moniteur dégonfle automatiquement et lentement le brassard pendant la mesure.
4. Les lectures seront affichées lorsque la mesure sera terminée.

Note: Pendant la mesure, vous devez rester immobile et ne pas serrer le brassard.




Pantalla de resultados de presión arterial


3. Registro de ECG

Il existe quatre méthodes d'enregistrement de l'ECG sans câble.

Remarque: la fonction d'enregistrement ECG n'est disponible que pour le modèle BP2.

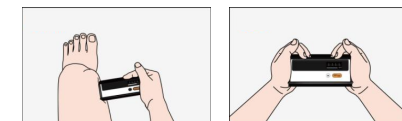

A. De la main droite à la jambe gauche B. Main à main

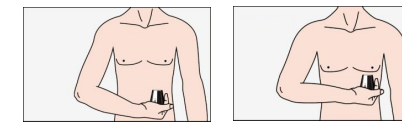

C. De la main droite à l'abdomen D. De la main droite à la poitrine

Pour démarrer un enregistrement ECG:

1. Placez votre paume droite sur les électrodes du côté droit du moniteur.
2. Placez les électrodes du côté gauche dans la position du corps que vous souhaitez mesurer.
3. Une fois les parties du corps placées sur les électrodes, appuyez sur la touche de fonction pour lancer l'enregistrement de l'ECG.
4. Les mesures seront affichées au bout de 30 secondes.



Écran ECG d'enregistrement

Note: Vous pouvez obtenir différentes amplitudes de signal à partir des différents méthodes. Utilisez la méthode A ou la méthode C si le signal est trop faible dans la méthode B.

4. Descargue la aplicación

Nombre de la aplicación: ViHealth
iOS: App Store
Android: Google Play

Note: NE PAS PAYER dans les paramètres de votre appareil intelligent.

